

Gebrauchsinformation / Instruction for use Medizinprodukt / Medical Device

Werolin® Wundreinigungsspray

Werolin® Wundreinigungsspray ist ein Spray zur Reinigung, Befeuchtung und Heilung von akuten Wunden.

Eigenschaften:

Werolin® Wundreinigungsspray dient zur Reinigung und Befeuchtung von akuten Wunden und unterstützt die Wundheilung (Vorbeugung von Infektionen durch erniedrigten pH-Wert).

- Reinigung von akuten Wunden, z.B. Schürf-, Riss- und Schnittwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Dekontamination von akuten Wunden
- Reduziert die Schwellung
- Reduziert die Blutung
- Fördert die Wundheilung
- Verhindert Infektionen
- Optimierung des Milieus (pH-Wert)
- Schmerzfremie Wundreinigung
- Löst Verkrustungen ab
- Für Kinder geeignet
- Beugt Narbenbildung vor*

* wenn das Wundgebiet mit einem Verband abgedeckt und mit **Werolin® Wundreinigungsspray** feucht gehalten wird, bis die Wunde geschlossen ist.

Indikation:

Zur Akut- und Erstversorgung bei kleinen, offenen Verletzungen (z.B. Schnitt-, Schürf-, Risswunden) und Verbrennungen 1. und 2. Grades.

Anwendung:

Wunde mit **Werolin® Wundreinigungsspray** reinigen. Direkt auf das Wundgebiet sprühen und bei Bedarf mehrmals wiederholen. **Werolin® Wundreinigungsspray** kann in Verbindung mit einem handelsüblichen Verbandstoff angewendet werden. Wenn möglich, Wundgebiet mit Verband abdecken und mit **Werolin® Wundreinigungsspray** feucht halten, bis die Wunde geschlossen ist. Darauf achten, dass der Verband nicht mit der Wunde verklebt. Weiterbehandlung ab dem 3. Tag mit **WERO Wund- und Heilsalbe**. Für eine kühlende Wirkung **Werolin® Wundreinigungsspray** im Kühlschrank aufbewahren. Kann auch am Mund- und Schleimhautbereich angewendet werden. Die Überkopfsprayette ermöglicht gleichmäßiges Sprühen aus jeder Position. Für Kinder geeignet. Die Anwendungsdauer richtet sich nach Art und Schwere der Verletzung.

Kontraindikation:

Bei bekannter Allergie oder Verdacht allergischer Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sollte das Produkt nicht eingesetzt werden. Bei Verbrennungen ab Grad 2b sollte ein Arzt hinzugezogen werden. Anwendungsbeschränkungen in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern sind bisher nicht bekannt. Kontakt mit Knorpelgewebe vermeiden. Nicht verwenden in Kombination mit anionischen Tensiden. Nicht in Verbindung mit silberhaltigen Verbandstoffen verwenden.

Nebenwirkungen: Nicht bekannt.

Gewebeverträglichkeit und Biokompatibilität:

Werolin Wundreinigungsspray® enthält keine hautreizenden Substanzen. Es ist nicht irritierend; nicht sensibilisierend.

Banken

VR-Bank Untertaunus e.G.
IBAN DE44 5109 1700 0001 0060 10
BIC VR BUDE 51

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE FF 510

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13485
ÖKOPROFIT

Sicherheitshinweise:

Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht einnehmen. Auf hygienische Entnahme achten. Nach Gebrauch verschließen um Verunreinigung zu vermeiden. Ist die Flaschenöffnung mit der Wunde in Kontakt gekommen oder anderweitig verunreinigt, ist die Flasche umgehend zu entsorgen. Vor Kindern sicher aufbewahren. Temperaturbegrenzung beachten. Gebrauchsanweisung beachten. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden. Nur einwandfreie und unbeschädigte Gebinde verwenden. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. Vor Sonnenlicht schützen. Trocken aufbewahren.

Werolin® Wundreinigungsspray is a spray for cleansing, moisturizing and healing of acute wounds.

Characteristics:

Werolin® Wundreinigungsspray is used for cleansing and moisturizing acute wounds and supports wound healing (prevention of infections due to low pH).

- Cleansing of acute wounds, e.g. lacerations, abrasions and cuts, 1st and 2nd degree burns
- Decontamination of acute wounds
- Reduction of swelling
- Reduces bleeding
- Supports wound healing
- Prevents infections
- Optimizes the environment on the wound surface (pH-level)
- For the pain-free wound cleansing
- Solves wound crusts
- Suitable also for children
- Prevents scarring*

* if the wound area is covered with a bandage and kept moist with **Werolin® Wundreinigungsspray** until the wound is closed

Indications:

For acute and initial care for minor, open injuries (e.g. cuts, abrasions, lacerations) and 1st and 2nd degree burns.

Directions for use:

Cleanse wound with **Werolin® Wundreinigungsspray**. Apply directly out of the bottle into the wound and if necessary, repeat several times. **Werolin® Wundreinigungsspray** can be used in combination with customary wound dressings. If possible, cover the wound area with dressing and keep wet **Werolin® Wundreinigungsspray** until the wound is closed. Make sure that the dressing does not stick to the wound. Subsequent treatment from day 3 recommended with **WERO Wund- und Heilsalbe**. For a more cooling effect store **Werolin® Wundreinigungsspray** in the refrigerator before application. Can be used on the mouth and on mucous membranes. The overhead spray allows spraying from any position. Suitable also for children. The duration of use is based upon type and severity of the injury.

Contraindication:

Do not use with hypersensitivity to any of the ingredients. A doctor should be consulted with burns second or third degrees. Restrictions on use in pregnancy and breastfeeding as well as in children are not yet known. Avoid contact with cartilage-tissue. Do not use in combination with anionic tensids. Do not use with silver-containing dressings.

Side effects:

Not known.

Banken

VR-Bank Untertaunus e.G.
IBAN DE44 5109 1700 0001 0060 10
BIC VR BUDE 51

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE FF 510

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Idsteiner Straße 94 Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
D-65232 Taunusstein info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13485
ÖKOPROFIT

Tissue tolerance and biocompatibility:

Werolin® Wundreinigungsspray does not contain skin-irritating ingredients. It is non-irritating and nonsensitizing.

General safety instructions:

For external use only. Do not swallow. Look after hygienic extraction. Close bottle after use to avoid contamination. Dispose the bottle immediately after contact of the bottle with the wound or in the case of otherwise contamination. Keep out of the reach of children. Consider temperature. Consider instructions for use. Do not use after expiration date. Do not use damaged packages. Protect from sunlight. Store in a dry area.

Haltbarkeit / Expiration date: 3 Jahre nach Herstellung / 3 years after manufacturing

Aufbrauchsfrist / Time limit to use: 12 Monate nach Anbruch / 12 months after opening

Packungsgröße / packaging size: 75 ml in Kunststoffflasche / 75 ml plastic bottle



Chargenbezeichnung / Batch Code /  **:** auf Flaschenboden aufgedruckt / printed onto bottom of bottle

Verfalldatum / expiry date /  **:** auf Flaschenboden aufgedruckt / printed onto bottom of bottle

Zusammensetzung / Ingredients (INCI):

Aqua purificata, Polyaminopropyl Biguanide, Trace Elements (Zinc, Iron)

CE 0197

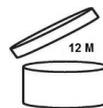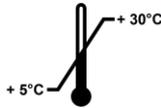

MD

Medizinprodukt

**Vertrieb durch:**

NAWA HEILMITTEL GmbH
Ostendstraße 100
D-90482 Nürnberg
Telefon: +49 (0) 911-544 41-0
Telefax: +49 (0) 911-544 41-11
E-Mail: info@nawa.com

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Str. 94,
D-65232 Taunusstein
Telefon 06128 9757-0
Telefax 06128 9757-50
E-Mail: info@wero.de
www.wero.de

Made in Germany

REV 022020

Banken

VR-Bank Untertaunus e.G.
IBAN DE44 5109 1700 0001 0060 10
BIC VR BUDE 51

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE FF 510

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13485
ÖKOPROFIT